

# Orgonski uZapper 108

## Uvod:

Zapper je jednostavna naprava za odstranjivanje parazita u ljudskom tijelu s slabom strujom niskog napona i određenom frekvencijom (zapiranje). Teorija djelovanja zappera se zasniva na tome da svaku bolest izazivaju paraziti (virusi, bakterije, gljivice, crvi) koji su prisutni u svakom čovjeku i koji mogu samostalno pokrenuti ili sudjelovati kao jedan od okidača za razvijanje raznih bolesti. Eliminiranjem ovih parazita tijelu se omogućuje da ozdravi.

Zapper služi za eliminiranje parazita. Svaki parazit ima određenu frekvenciju na kojoj biva eliminiran, a kako zapper emitira signal koji ima široki frekvencijski spektar harmonika i jedna frekvencija je dovoljna za eliminaciju svih parazita.

Svi paraziti su pozitivno nabijeni, kao i svi slobodni radikali u tijelu, odnosno nezdravo tkivo. Zapper s malom električnom strujom opskrbljava tijelo s viškom elektrona, odnosno s negativnim ionima koji neutraliziraju pozitivno nabijene parazite i radikale pomažući tijelu da povratu prirodno stanje ravnoteže i zdravlja. Može se reći da zapper ima sličan efekt kao i uzemljivanje kada se tijelo opskrbljuje s negativnim ionima.

Zapper osim direktne eliminacije parazita utječe i na vitalnost krvnih zrnaca čineći ih vitalnijima te samim time jača imunost sustav odnosno pročišćava i energizira krv. Teorija kojom se objašnjava ovakav blagotvoran efekt zappera je pravokutni oblik signala koji uređaj generira, a koji po karakteristikama slični tzv. "h" impulsu ljudskog živca i koji u biti privlači dodatnu životodajnu energiju iz okolnog prostora i vitalizira tijelo i krv čovjeka. Stoga se može reći da zapper ujedno osim antimikrobnog djelovanja ima i probiotičko djelovanje (podržava život i vitalnost).

Orgonski zapper osim samog generatora pravokutnog impulsa niskog napona određene frekvencije sadrži i orgonitni blok koji dodatno privlači/generira životnu silu (chi, pranu) iz okolnog prostora ili drukčijim riječima rečeno neorganiziranu, kaotičnu, štetnu, isprekidanu suptilnu energiju koja ima negativan utjecaj na ljudsko zdravlje konvertira u visoko organiziranu, skladnu, životodajnu i iscjeljujuću energiju čime se sveukupni iscjeljujući efekt zappera višestruko povećava.

## Reference:

- <http://mandrilo.com/orgonski-zapper>
- <http://mandrilo.com/zapper>
- <http://mandrilo.com/svi-moji-zapperi>
- <https://www.orgoniseafrica.com/blog/post/zappers-and-the-fda/>
- <https://worldwithoutparasites.com/faq-instructions/how-why-it-works/>

## Sadržaj uputa:

1. Mjere opreza .....	3
2. Metode zapiranja .....	4
3. Vrijeme i način zapiranja .....	6
4. Anti parazitni program .....	6
5. Tehničke karakteristike uZapper 108 .....	7
6. Opis rada .....	8
7. Brzi početak (zapiranje).....	10
8. Liste frekvencija .....	11
9. Opis pojedinih frekvencija.....	15
10. Dodatna oprema .....	16

## Sadržaj paketa:

- uZapper s orgonitnim blokom i punjivom 9V baterijom. Špica kristala zamotana s Mobiusovom zavojnicom se nalazi u orgonitnom bloku.
- dvije palice i crveno crni kabel za spajanje metalnih palica na uZapper
- nožne pločice i pripadajući kabel
- samoljepive elektrode i pripadajući kabel
- 220V/12V AC/DC adapter za napajanje
- upute
- poklon: orgonitni privjesak

## 1. Mjere opreza

Zapper može koristiti svatko u bilo kojoj dobi, pa čak i kućni ljubimci, ali **trudnice i osobe s pacemakerom i sličnim medicinskim uređajima ne bi trebali koristiti zapper** kako se ne bi omeo rad tih uređaja. Ako se mala djeca i stariji ljudi (senilni) zapiraju, potrebno ih je nadzirati.

Kada mijenjate bateriju pažljivo odspojite 9V priključak jer se isti vrlo čvrsto prijanja na bateriju. Prstima otvorite zapper s lijeve bočne strane na središnjem prorezu. Nemojte koristiti veliku silu i potezati priključak jer isti može puknuti, već probajte s prstima prvo olabaviti spoj, zatim ga otkaçiti od baterije. Obavezno isključite uređaj preko sklopke prije promjene baterije.

Zapper koristi **punjivu NiMh 9v** (250mAh) bateriju i samo ista takva se može staviti u zapper kao zamjena.

Zapiranje kod nekih ljudi utječe na probavu, odnosno izaziva zatvor, stoga ako iskusite ovu nuspojavu, smanjite vrijeme zapiranja ili uzimajte probiotike uz zapiranje jer očigledno da i 'dobre' crijevne bakterije kod nekih ljudi mogu biti zahvaćene zapiranjem.

**Izbjegavajte kratki spoj elektroda.** Iako je zapper opremljen zaštitom od kratkog spoja, moguće je pregrijavanje uređaja i veća potrošnja struje.

### Ograda:

Zapper je isključivo elektronički generator kvadratnog signala niske frekvencije i niskog napona (9-12V). Ograđujem se od bilo kakvih posljedica korištenja istoga. Ja osobno i dosta drugih ljudi je osjetilo povoljne zdravstvene efekte uslijed korištenja zappera, međutim ne garantiram niti reklamiram ovaj uređaj kao medicinsku terapiju, sve ostavljam na osobnu procjenu, a ako netko ovaj uređaj koristi za medicinske svrhe to **ostavljam na njegovu vlastitu odgovornost.**

### Garancija kvalitete:

Zapper ima doživotno jamstvo osim na potrošne dijelove kao što su baterija, kabeli i elektrode.

## 2. Metode zapiranja

Postoji više metoda zapiranja:

- **držanje metalnih palica u ruci** s eventualnim dodatkom metalnih pločica za noge
- zapiranje s **samoljepivim elektrodama** koje se mogu pričvrstiti u blizini kritičnog mjesta na tijelu (ne preporuča se područje glave i vrata)

Za zapiranje s palicama je potrebno priloženi kabel utaknuti u utičnicu (krajnje lijevo na prednjem dijelu uređaja), a štipaljke kabela zakačiti na palice. Vrlo je važno da se ovaj priključak do kraja ugura u 3.5mm utičnicu na zapperu.

**Važna napomena:** kad se vrši zapiranje, preporuka je da se **popije malo više vode prije zapiranja** (čša ili dvije vode) kako bi se tijelu olakšao proces detoksifikacije organizma. Umjesto obične vode, moguće je popiti malo koloidnog srebra čime ovaj proces biva efikasniji.

Zapiranje samo s palicama (preporuka):

Zapiranje se može obaviti bez navlaženih ubrusa, ukoliko vam je djelovanje zapera iritirajuće (trnci, lagano strujanje). Efekt zapiranja je isti.

Način zapiranja s navlaženim (u otopini soli) metalnim palicama:

**Upozorenje:** sol povećava vodljivost/efikasnost signala, ali može nagrizzati kožu, palice i kabele, stoga izbjegavajte ovaj način zapiranja, osim ako ne želite eksperimentirati

U zdjelu se ulije malo obične vode i stavi se dosta soli (šaka ili dvije žlice) i dobro se razmuti. Čak je dobro staviti toplu vodu da se sol brže rastopi. Papirnati ubrus se okine na četiri jednaka komada. Dva komadića se umoče u zdjelu i s njima se obaviju elektrode, ne smeta ako ima i par slojeva (namotaja) oko elektrode. Bolje je koristiti malo kvalitetnije papirnate ubruse (deblje) da se ne raspadnu kad se smoče, međutim mogu se koristiti i izrezani dijelovi kuhinjske krpe ili tanke pamučne tkanine koji se mogu nanovo upotrijebiti. Iscijedi se višak vode s elektroda, stoga je najbolje ispod svega držati krpu. Nakon toga se pristupa zapiranju. Potrebno je što čvršće držati elektrode za bolji efekt. Malo vode će se još iscijediti kako budete držali elektrode, ali ako niste pretjerali to vam neće smetati.

Prilikom zapiranja poželjno je osjetiti lagane trnce u rukama od električnih impulsa zappera, kad se ovlaženi ubrus osuši, trnci će postati sve slabiji. Zapiranje i dalje radi čak i ako se trnci ne osjete, stoga ne treba odmah prekidati. Zapiranje s jednim setom ovlaženih ubrusa je najefektnije do 30-45 minuta, kad je poželjno promijeniti ubruse, staviti nove ovlažene, te usput promijeniti i polaritet palica (npr. ako ste prije držali palicu s crvenom žicom u desnoj ruci, sad je stavite u lijevu). Na zapiranje se ovako ‘potroši’ 1 do 1.30 sat, tijekom dana možete imati više ovakvih ‘sesija’ zapiranja. Nakon zapiranja bakrene elektrode obavezno posušiti i obrisati. One obično potamne od oksidacije, ali to ne smeta. Ipak nakon zapiranja ruke imaju miris bakra iako nisu bile u direktnom doticaju s elektrodama, stoga je potrebno isprati ruke nakon ovog procesa.



### *Komplet za zapiranje s metalnim elektrodama*

Jedina mana ovog načina zapiranja s orgonitnim zapperom je ta što je sam orgonitni blok u kutiji zappera koji je relativno udaljen od tijela. Stoga preporuka: ako se zapirate orgonitnim zapperom i ako se služite metalnim palicama, onda kutiju s orgonitnim blokom držite na tijelu (u krilu ako sjedite) ili upravo na bolno mjesto.

### *Upotreba ionskog koloidnog srebra kod zapiranja:*

Umjesto obične vode i soli, za vlaženje papirnatih ubrusa koje se stavljaju na palice, moguće je koristiti ionsko koloidno srebro. Koloidno srebro je manje vodljivo nego mješavina vode i soli, ali je zato potencijalno puno efikasnije jer omogućava upijanje iona srebra direktno u tijelo tzv. postupkom elektroforeze što u sinergiji s zapiranjem predstavlja moćnu kombinaciju za eliminaciju širokog spektra parazita i bakterija. Korištenje koloidnog srebra ujedno omogućava da se izbjegne moguća iritacija kože kod upotrebe soli kod osjetljivih osoba.

### *Način zapiranja s samoljepivim elektrodama:*

Zapiranje je moguće i s fleksibilnim samoljepivim elektrodama koje se mogu postaviti na bilo koje dvije točke na tijelu na koje se želi koncentrirati signal zapera (osim glave i vrata). Ovo je zgodan način jer se zaper može staviti u džep, elektrode na tijelo, što omogućuje da se radi nešto drugo dok se istovremeno zapira (**hands-free mode**).

Kabel na koji se spajaju samoljepive elektrode se spaja na isti način kao i kabel za palice. Komplet se sastoji od kabela (1m dužine) i dvije elektrode (4x4cm). Ukoliko osjetite trnce, zatezanje mišića/nerva ili peckanje, odmah prekinite zapiranje i premjestite elektrode na veću udaljenost jednu od druge ili elektrode postavite na predio tijela gdje je koža deblja.

**Održavanje elektroda:** nakon uporabe zaštititi folijom. Možete ih čistiti četkicom za zube: dodajte kap vode i četkajte lagano, ali ne grebite po njima, prođite nekoliko puta u jednom smjeru. Elektrode možete držati u hladnjaku (ne u zamrzivaču), bar 24 sata, čime se njihov vijek trajanja produžava.

### 3. Vrijeme i način zapiranja

Preporuka Hulde Clark je da se zapiranje obavlja u tri koraka po 7 minuta s 20 minuta pauze između. U prvom ciklusu se eliminiraju paraziti i crvi, kad se oni raspadnu tada otpuštaju svoje viruse i bakterije, koji se onda eliminiraju u drugom ciklusu, treći ciklus služi za finalno eliminiranje eventualnih ostataka parazita koji su još živi. **Prije i poslije zapiranja je potrebno popiti malo više vode, a za vrijeme zapiranja ništa ne jesti, eventualno se može popiti još vode koja pomaže u čišćenju organizma od parazita.** Ovaj proces se može obaviti više puta na dan.

Međutim, iskustva korisnika zapera govore u prilog tome da se vrijeme zapiranja ne mora razdvajati u ova tri koraka, već da može biti proizvoljno dugo (bez prekida). Zapirati se praktično može sve dok simptomi neke bolesti ne nestanu ili se značajno ublaže. Ipak je **preporuka da se započne postupno s zapiranjem, od pola sata na dan, pa s postepenim povećavanjem vremena dok sami ne ocijenite koliko vam je dnevno potrebno. Zapiranje se može obaviti u nekoliko navrata (sesija) tokom dana što je najefikasnije.**

### 4. Anti parazitni program

Zapper efikasno uništava parazite, ali teško dopire do dobro skrivenih jajašaca ili ličinki parazita u tijelu koje paraziti svugdje ostavljaju. Za efikasno eliminiranje i jajašaca parazita odnosno svih nepoželjnih parazita iz tijela najbolje je koristiti biljne preparate, odnosno po receptu Hulde Clark, raditi cijeli Anti-parazitni program u trajanju od 40 dana koji uključuje i čišćenje jetre od žučnih kamenaca. Kombinacija upotrebe zapera, čišćenja jetre i konzumiranja pelina, crnog oraha i klinčića u sklopu Anti-parazitnog programa je jedan od najboljih pristupa za detoksifikaciju i čišćenje organizma od parazita. Ovaj bi program trebalo prakticirati najmanje jednom ili više puta na godinu dana, jer paraziti uvijek nađu način da se vrate nazad u organizam.

Više o Anti-parazitnom programu:

<https://antiparazitni-program.com>

<https://www.prirodom-do-zdravlja.net/tekst/antiparazitniprogram.html>

## 5. Tehničke karakteristike uZapper 108

Mikrokontroler	ATMEGA328@16Mhz
Generator signala	ATMEGA328@16Mhz
Ekran	OLED 120x64 SH1106
Orgonitni blok	DA
Mobius zavojnica	DA
Frekvencijski raspon	0.5Hz - 1Mhz
Rezolucija promjene frekvencije	0.1Hz
Maksimalni napon signala	12V
Pozitivni offset signala	DA
Radiantni signal	DA
Mogućnost unosa proizvoljne frekvencije	NE
Memorija	208 frekvencija u 89 lista
Mogućnost automatskog mijenjanja frekvencija (sweep)	DA, 89 raznih lista (sweep modova)
Raspon intervala kod automatskog mijenjanja frekvencija	1-60min
Dvostruki izlaz: za zapiranje (low power) i za pokretanje orgonita (hi power)	NE
Napajanje	9V, 12V, 15V preko AC/DC adaptera ili baterije ili preko 12V auto priključka
Baterija	9V (punjiva baterija)
Trajanje baterije (zapiranje)	5-10hr
Indikator istrošenosti baterije	DA
Zaštita od kratkog spoja	DA
Izlazni krug jake struje za pogon zavojnica orgonita	
Izlazni power FET	
Izlazni FET driver	UCC27324
Izlazni ograničivač jake struje	
Maksimalna izlazna struja kroz krug jake struje	
Potrošnja struje (idle mode)	2.5mA@12V
Potrošnja struje (zapping mode)	18mA@12V
Potrošnja struje (orgonite mode)	

## 6. Opis rada

Uključivanje/isključivanje uređaja se obavlja s sklopkom s prednje strane uređaja. Kabel za palice se spaja na zapper preko 3.5mm priključka na prednjoj strani zaperera (krajnje lijevo) označenu s **ZAP**, a ako se koristi vanjski orgonit (piramida) onda se kabel spaja na utičnicu označenu s **ORG**. **Vrlo je važno da se ovaj priključak do kraja ugura u 3.5mm utičnicu na zapperu**. AC/DC adapter za napajanje uređaja i punjenje baterije se spaja s prednje strane (krajnje desna utičnica). Kad se spaja orgonit, onda je savjet da se zapper koristi s spojenim AC/DC adapterom radi veće potrošnje struje.



Navigacija i upravljanje zapperom se odvija s mini 5way tipkom (mini joystickom ispod ekrana):

- LIJEVO, DESNO – mijenja se pozicija kursora, odnosno trenutne vrijednosti menija koji blinka. GORE, DOLE - mijenjaju se podaci ispod trenutne pozicije kursora.
- START/STOP – ako se tipka pritisne put dole i drži par sekundi uZapper počinje generirati signal, ako već generira signal, onda prestaje. uZapper ne generira signal dok se ne pristigne START.

### Generalni opis:

Frekvencije u uZapperu su podijeljene u 89 lista. Svaka lista može sadržavati od 1 do više frekvencija. Jedna lista frekvencija definira sweep mod.

### Meni:

Glavni izbornik/meni zappera je podijeljen u dva dijela: gornji dio koji definira parametre liste i frekvencije i donji koji prikazuje aktualnu vrijednost frekvencije definiranu sa brojem liste (**List**) i brojem trenutne frekvencije unutar liste (**Freq**). Navigacija između raznih opcija menija se vrši pritiskom LIJEVO/DESNO s 5way joystickom. Ako se mijenja vrijednost List tipkama



GORE/DOLE, odnosno ako se mijenja trenutna lista onda se svi ostali parametri i frekvencije nove liste učitavaju, a ako se promjene, onda se automatski spremaju u memoriju.

### **Generiranje signala:**

Ako se pritisne START tipka (potrebno je držati tipku par sekundi). Zapper će izvršavati trenutnu listu na način da automatski mijenja frekvencije iz liste počevši od trenutne koja je prikazana na ekranu pa sve do zadnje u listi. Dolaskom na zadnju frekvenciju u listi, zapper će ponovno startati s prvom frekvencijom s liste. Prilikom svake promjene frekvencije, nova frekvencija će zatirati na ekranu, a ako je ekran ugašen (power save mode) onda će se kratko prikazati na ekranu nova frekvencija.

### **Lock & Power Save:**

Kad uZapper generira signal tada se nalazi u zaključanom modu (mali ključić se pojavi na ekranu gore/lijevo). Niti jedna tipka ne reagira osim kad se opet pritisne START tipka i drži se par sekundi kako bi se prekinulo generiranje signala ili ako se uZapper isključi. Kad uZapper generira signal onda se gore na sredini ekrana prikaže znak za generiranje signala. Nakon 4 minute, ako niti jedna tipka nije pritisnuta, uZapper automatski gasi ekran radi štednje energije i samog ekrana (power save).

### **Time:**

Postavka Time (T) određuje vrijeme izraženo u minutama (1-60) u kojem će uZapper emitirati pojedinu frekvenciju s liste prije nego što skoči na iduću frekvenciju s liste. Kad se dođe do kraja liste, zapper skače na prvu frekvenciju s liste i tako nastavlja u beskonačnoj petlji. Napomena: **za svaku frekvenciju se posebno pamti period.** Postoje dvije specijalne postavke ove vrijednosti:

**CST** – označava da će se izabrana frekvencija konstantno generirati. Zapper neće mijenjati frekvenciju sve dok se ne zaustavi rad s START tipkom od strane korisnika.

**3x7** – označava da će zapper emitirati izabranu frekvenciju u tzv. Hulda Clark modu, **3x7 minuta s 20 minuta pauze** između zapiranja. Kad je frekvencija pauzirana na ekranu će biti ispisano (**paused**). Nakon izvršavanja ovog moda, zapper će promijeniti frekvenciju na iduću frekvenciju s liste. **Napomena:** ako se timer prve frekvencije u listi postavi na 3x7 onda će zapper unutar 7 minuta, svake minute mijenjati sve frekvencije u listi.

### **Sleep:**

Postavka (S) određuje timer (u minutama) nakon kojega zapper zaustavlja generiranje signala i postavlja zapper u stanje spavanja (sleep), u kojem se maksimalno štedi energija. Ovaj parameter se pamti na nivou liste i kad se starta lista onda se 'sleep' brojka pojavljuje u gornjem dijelu ekrana (lijevo od znaka za bateriju). Ovaj mod je zgodan jer omogućava zapiranje određeni period, te automatsko gašenje/prekidanje zapiranja nakon ovog perioda.

### **Indikator istrošenosti baterije:**

Kad je baterija istrošena indikator baterije u gornjem desnom kutu ekrana počne treptati, zapper automatski prekida rad i ide u stanje spavanja (sleep) mode.

### **Punjenje baterije:**


**Zapper mora biti uključen prilikom punjenja baterije:** zapper se spoji na AC/DC adapter, zatim se uključi. Punjenje baterije bi trebalo početi automatski nakon paljenja zappera. Indikator za bateriju signalizira da se baterija puni.

## 7. Brzi početak (zapiranje)

Priključiti palice na štipaljke, te kabel utaknuti u zapper u 3.5mm krajnje lijevu utičnicu (**ZAP**) na prednjoj strani uređaj, uključiti zapper s sklopkom. Zapper generira signal kad se duže drži (par sekundi) tipka **START** (pritisne se 5way tipka prema dole) i prestaje generirati signal kad se ista tipka opet duže drži. Kad se generira signal, zapper je zaključan, odnosno niti jedna tipka ne reagira.

### Pokretanje liste

Namjestiti blinkajući kursor na vrijednost liste npr **List: 01**, odabrati listu 01 ili 02, 03 ili ostale. Za pokretanje liste ili sweep moda držati duže **START** tipku (pritisne se 5way joystick prema dole) dok zapper ne počne generirati signal. Kad zapper počne generirati signal na ekranu će pisati **List 01 started**. Zapiranje se prekida ako se opet duže drži **START** tipka.

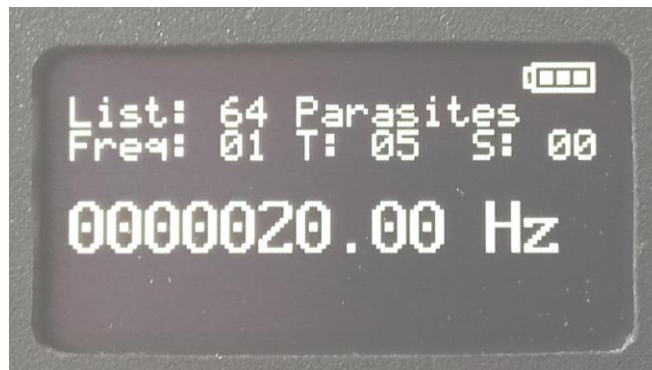

Izgled ekrana kad zapper starta listu 64 u modu s periodom svake frekvencije T=5 minuta. Prva frekvencija u listi je 20Hz

### Zapiranje s jednom frekvencijom

Ako se želi konstantno zapirati s jednom frekvencijom, onda se blinkajući kursor postavi na vrijednost trenutne memorijske lokacije frekvencije npr **Freq: 01**, odabere se željena frekvencija, zatim se namjesti **T:** parameter na **CST**. Kad se odabere prava kombinacija **List, Freq i T**, odnosno kad se namjesti željena trenutna frekvencija, ona se ista može pokrenuti ako se drži duže **START** tipka dok zapper ne počne generirati signal.

## 8. Liste frekvencija

Lista	Opis	Frekvencije
01	Acne (564 for 6min)	564, 2720, 1800, 1600, 1550, 1552, 1500, 802, 880, 787, 727, 465, 444, 428
02	Adenovirus (a virus that can cause colds/flu and infections in the lungs, stomach, and intestines)	333, 666, 768, 10000, 5000, 1500, 969, 880, 787, 728, 48, 20
03	AIDS	465, 727, 787, 880, 1550, 1500, 1.20
04	Allergy	10000, 7344, 5000, 1550, 880, 787, 727, 444, 95, 33, 20
05	Alopecia	10000, 30000, 5000, 2720, 1552, 880, 800, 787, 727, 465, 95, 20
06	Anal itching (also use parasites general)	10000, 880, 787, 727, 465, 95, 444, 20
07	Anxiety	1.50, 4, 6.80, 7.83, 95, 10000
08	Arthritis	10000, 5000, 2720, 1550, 1500, 880, 802, 800, 787, 776, 766, 727, 650, 600, 20
09	Arthritis rheumatoid	250, 1.20, 650, 625, 600, 787, 727, 262, 776, 766
10	Asthma	7344, 2720, 1800, 1600, 1500, 880, 787, 727, 444, 128, 95, 72, 20, 0.5
11	Autism (also use parasites and detox general)	20, 48, 128, 152, 465, 727, 787, 800, 880, 1550, 1902, 5000, 9887, 10000, 15000, 38014.30
12	Backache	33, 212, 305, 727, 787, 880, 1550, 10000
13	<b>Bacterial infections general</b>	20, 465, 664, 727, 787, 800, 832, 880, 1550
14	Bladder (see also prostate and urinary infections)	1550, 880, 802, 787, 727, 465, 432, 20, 9.39
15	Bronchitis (see also lungs)	7344, 880, 727, 333, 20, 9.39
16	Cancer general	10025, 10000, 6766, 5000, 3176, 2950, 2720, 2128, 2127, 1552, 880, 800, 776, 766, 728, 666, 464, 333, 20
17	Cancer lungs (carcinoma bronchial)	2128, 1820, 462, 776, 852, 1582, 2104, 2144, 2184, 3672
18	Cancer prostate (see also prostate)	20, 95, 666, 727, 787, 766, 800, 2127, 2128, 2720, 5000, 2145, 666

<b>Lista</b>	<b>Opis</b>	<b>Frekvencije</b>
19	<b>Candida</b>	10000, 5000, 3176, 2128, 728, 465, 464, 125, 95, 20, 727
20	Chemtrail detox	664, 7344, 2842, 1147, 686.60, 684.10, 1113, 779.90, 829.30, 679.20, 865, 969.90, 1067, 783.60, 800.40, 1045, 1062, 673.90, 690.70, 727
21	Chronic fatigue syndrome	7.83, 444, 465, 664, 787, 880, 1550, 1902, 5000, 10000
22	Cold (sore throat)	727, 787, 880, 1550, 1600, 2720
23	Colitis	10000, 5000, 1550, 880, 832, 802, 787, 727, 465, 440, 152
24	<b>Corona Virus</b>	145.90, 331.39, 437.6, 662.7, 1167, 1312.79, 1491.2, 2333.9, 4667.8, 5301.89, 9335.6
25	Crohns disease	10000, 727, 664, 440, 832, 880, 1550, 20
26	Cystic fibrosis	523, 557, 478, 776, 660, 727, 778, 787, 802, 880
27	Cystitis chronic (inflammation of the urinary bladder and uters)	1550, 880, 802, 787, 727, 465, 20
28	Dental problems (toothache)	190, 465, 650, 666, 787, 1550, 1600, 1800, 2720, 5170, 10000, 30000
29	Depression	7.83, 787, 800, 3176, 5000, 10000
30	<b>Detox general</b>	10000, 3176, 880, 787, 727, 676, 635, 625, 465, 444, 440, 10, 7.83, 48, 1
31	Diabetes 1 (Warning: can cause large drop in blood sugar level. Use 5000Hz for 15 min)	5000, 2127, 880, 800, 787, 727, 465, 440, 20
32	Diabetes 2	2128, 1550, 787, 465, 444, 95, 72, 48, 20
33	Digestion problems	10000, 880, 1550, 832, 800, 787, 727, 465, 444, 20, 95, 72
34	E. Coli	7849, 1730, 1552, 1550, 1244, 1000, 934, 832, 800, 634, 548, 413, 333, 282
35	Ear healing (tinnitus, hearing loss, otitits)	7.83, 10, 20, 440, 727, 787, 880, 10000
36	Endometriosis	6766, 2128, 1550, 800, 676
37	Epilepsy	125, 600, 650, 727, 802, 880, 1550, 5000, 10000, 30000
38	Epstein Barr virus (also use parasites general)	1920, 105, 8768, 669, 465, 776, 880, 787, 727

<b>Lista</b>	<b>Opis</b>	<b>Frekvencije</b>
39	Eye healing (blurred vision, cataracts, crossed eyes, diplopia, infections, etc.)	10000, 1830, 1600, 1552, 880, 787, 727, 20, 1.20
40	Fibromyalgia	880, 800, 728, 5000, 2720, 2128, 664, 464, 20
41	<b>Fungi (mold) general</b>	333, 880, 766, 728, 464
42	Harmonize	4, 7.83, 15, 432
43	Headaches, migrain	1.20, 7.83, 10, 625, 650, 727, 787, 880, 3000, 10000
44	Healing_and_regeneration	2720, 528, 266
45	Heart	1, 20, 5000
46	Heavy metal detox	1902, 9887, 727, 15000, 38014.30
47	Helicobacter pylori	676, 2950, 2167, 880, 728, 695
48	Hemorrhoids	4474, 6117, 774, 1550, 447, 880, 802, 727
49	Hepatitis	1550, 880, 802, 727, 768, 934, 528
50	Hernia	727, 787, 2720, 5000, 10000
51	Herpes (run 1488 for 15 min, run 2950 for 15 min)	1488, 82, 10000, 880, 2145, 2950, 1550
52	Herpes zoster	10000, 3343, 2170, 1600, 1500, 1160, 880, 787, 664, 3.9
53	Hormonal imbalances	5.5, 635, 10000
54	HPV	45, 110, 404, 874, 907, 9258, 1002.16, 16970, 64734
55	<b>Hulda Clark</b>	30000
56	Hypertension	7.83, 15, 20, 727, 787, 880, 3176, 10000
57	Hyperthyroid	3, 0.5
58	Hypothyroid	2, 12, 35, 16000, 10000, 160, 20
59	Infertility	465, 650, 666, 727, 787, 880, 2127
60	Influenza	20, 800, 880, 969, 1550, 2720, 5000, 7344
61	Kidney	4412, 2720, 1600, 1550, 1500, 880, 800, 600, 465, 250, 125, 676, 440, 444, 727, 787, 10000, 1552, 20
62	Knee joint pain	1550, 880, 802, 787, 727, 28, 20, 7.69, 3, 250, 9.39
63	Liver support (also try E. coli and Parasites general)	33, 1552, 802, 727, 787, 880
64	Lungs (pneumonia and other problems)	20, 7344, 5000, 727, 2720, 787, 1550, 800, 969, 880, 818
65	Lyme (Borrelia) (use 625 for 10 min)	625, 800, 615, 432, 10000, 2720, 880
66	Meningitis	5000, 720, 20, 676, 1550, 802, 880, 832, 787, 727, 650, 625, 600, 465, 444, 125, 72, 20, 428

<b>Lista</b>	<b>Opis</b>	<b>Frekvencije</b>
67	Menopause symptoms	5.5, 727, 787, 880
68	Menstrual problems	880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20
69	Mental disorders (general aid, especially if toxins are the cause. Also use mineral supplement)	522, 146, 10000, 125, 20, 4.9, 428, 550, 802, 7.83
70	<b>Morgellons</b>	10000, 7344, 5000, 1550, 880, 787, 727, 1600, 3176, 2720, 1488, 800, 464, 432, 20, 625
71	Multiple sclerosis (use 5000 for 30min)	5000, 2720, 1550, 880, 802, 787, 728, 464, 20
72	Nerve healing	10, 440, 625, 650, 1600, 2720, 3176, 10000
73	Neuropathy	10000, 3176, 2720, 1800, 1600, 1550, 880, 802, 787, 727, 650, 600, 440, 125, 95, 20, 7.83, 3
74	Pain	40, 666, 727, 787, 880, 1550, 2720, 3000, 10000
75	<b>Parasites general</b>	20, 128, 152, 164, 440, 465, 650, 727, 800, 880, 969, 1359, 1550, 2127, 2720, 5000, 6766, 10000
76	Parkinson (use 33 for 30 min)	33, 5000
77	Prostate	2720, 2128, 880, 802, 787, 728, 727, 666, 465, 125, 72, 20, 100, 2720, 2127, 1550, 776, 444
78	Rheumatism (also use Arthritis rheumatoid)	10000, 776, 766, 262
79	Sacred geometry	432
80	Schumann Earth frequency	7.83, 14, 20, 33, 45
81	Sinusitis	1600, 1552, 1500, 880, 802, 464, 440, 72, 20, 125, 600, 615, 625, 650, 95, 128, 432
82	Solfeggio	174, 285, 396, 417, 528, 639, 741, 852, 963
83	Spondylitis (ankylosing)	3000, 95, 1550, 326, 880, 787, 727, 650, 10, 1.20, 100, 428
84	Staphylococcus aureus	786, 8697, 7270, 1050, 999, 943, 824.4, 787, 738, 728, 727, 644, 555, 478, 424
85	Staphylococcus general	7160, 1109, 1089, 885, 880, 876, 786, 728, 674, 634, 550, 453
86	Streptococcus	1902, 1522, 880, 728, 535, 368, 318, 128, 8478, 1216, 425
87	Urinary tract infections	20, 1600, 444, 3000, 465, 5000, 727, 4412, 787, 10000, 880, 1550
88	<b>Virus general</b>	444, 465, 666, 720, 727, 800, 5000, 10000
89	Warts	666, 727, 1600, 2127, 2720

## 9. Opis pojedinih frekvencija

Opis	Frekvencije (Hz)
<b>Harmonize</b>	
Schumann Earth frequency	7.83, 15
Sacred geometry	432
Solfeggio - Relieving pain and tension	174
Solfeggio - Safety, energy, and survival	285
Solfeggio - Liberating Guilt and Fear	396
Solfeggio - Undoing Situations and Facilitating Change	417
Solfeggio - Transformation and Miracles (DNA Repair)	528
Solfeggio - Connecting/Relationships	639
Solfeggio - Expression/Solutions	741
Solfeggio - Returning to Spiritual Order	852
Solfeggio - Oneness/Unity	963
<b>Parasite types</b>	
Parasites flukes general (pancreatic, liver and intestinal)	6766
Parasites flukes intestinal (by Hulda Clark)	2127, 6766
Parasites pinworms	20
Parasites hookworm	440
Parasites roundworms general	20, 128, 152, 650, 2720
Parasites tapeworms	164
Parasites human rope worm	1359
Parasites (worm eggs)	164, 969
<b>Detox</b>	
Mercury detox	48
Chemtrail detox	List 21
Pesticide detox	1
Measles vaccine detox	787, 880
Heavy metal detox	1902, 9887, 727, 15000, 38014.30
<b>Other Zappers</b>	
Bob Beck zapper	4
Don Croft Terminator zapper	15
Hulda Clark zapper	30000

**Napomena:** dodatne frekvencije se mogu vidjeti na:

<http://www.electroherbalism.com/Bioelectronics/FrequenciesandAnecdotes/CAFL.htm>

<https://www.spooky2-mall.com/download-rife-frequency-list>

<http://www.etdfl.com/download>

## 10. Dodatna oprema

### **A) Pločice za noge:**

**Metoda 1:** Kod zapiranja s metalnim palicama za ruke moguće je koristiti i metalne pločice za noge. Zapiranje na ovaj način je puno efikasnije jer struja ide čitavim tijelom.

Kabel za palice se utakne u utičnicu označenu s ZAP, a drugi kabel se utakne u utičnicu ORG te se spoji na obje pločice za noge (na za to predviđene ‘uši’ na krajevima pločica, vidi dole sliku).

**Metoda 2:** Moguće je i zapiranje isključivo s pločicama za noge na način da se kabel koji se inače koristi za spajanje palica, zakači štipaljka na pločice te se utakne u utičnicu ZAP na zapperu. Noge se postave na pločice, a zapper se starta.

Na ovaj način su ruke slobodne. Ova metoda je zgodna kod rada na računalu ili sličnog posla koji zahtjeva dugo sjedenje.